

Alfa3

SES DÜNYASI

Konforlu İşitme özgürlüğü



helix[®]
işitme cihazları
İyi duymak hayata bağlar

Alfa3

Etkileyici, özel ve fonksiyonel özelliklere sahiptir.



İşitme güçlüğü çeken insanların ihtiyacını biliyoruz ve beklentilerini önemsiyoruz.

Yüksek teknolojinin sunduğu olanaklara odaklanarak daha net ve zengin ses sunuyoruz.

Alfa3 cihazınızı kullandıkça daha çok seveceksiniz. Her gün sevginizi kazandıracak başarılar sergileyecektir. Gürültülü ortamlarda daha az dinleme çabası gösterip, konuşmaları anlamanın tadını çıkaracaksınız. *Alfa3*'ün performansı her gün siz heyecanlandıracaktır.



Gürültüler istediğiniz sakinliğe dönüşür

Sohbete katılıp zevk almak ve konuşmaları takip etmek giderek zorlaşıyor.

Çünkü şehir ve çevre gürültüleri kontrolsüz bir şekilde artıyor.

Çevre gürültülerinin etkilerini azaltmak ve yüksek gürültüleri baskılamak için **Alfa3**, akıllı özelliklerle donatıldı.

Örneğin;

✓ **Gürültü azaltıcı yönetimi;**

Konuşmalar için önemli olan sesin ana özelliğini korur ve beraberinde en iyi rahatlama sağlar.

Çevre gürültü kaynaklı olan trafik sesi gibi veya evsel makine olan elektrik süpürgesi gibi aletlerin istenmeyen rahatsız edici gürültülerini azaltır.





✓ Uyarlanabilir geri bildirim kesme yönetimi:

İşitme cihazından çıkan can sıkıcı ısıklık seslerini kullanıcı tarafından duyulmadan önce hızlıca bastırır.

✓ İçsel ses bloke Yönetimi:

İşitme cihazları çalışırken normalde içsel bir gürültü üretirler. Bu gürültü genelde hafif ve orta dereceye kadar işitme kaybına sahip kullanıcılar tarafından rahatsız edici bulunur. İçsel ses bloke yönetimi, içsel rahatsız edici sesi bastırarak konforlu kullanım sunar.

✓ Darbe gürültüsünü bastırma yönetimi:


Ani ve kısa süreli olan rahatsız edici sesleri bastırır. Kaşık, çatal sesleri, kapı çarpması, bardak sesleri gibi sesler itici ses olarak kabul edilip hemen bastırılır.

Öncelikleriniz öne çıkıyor

Alfa3, *ear Clarity* platformuna sahip olup farklı akıllı özelliklerle donatılmıştır. Rahat işitme konforu sağlayarak konuşmaların anlaşılmasına katkı sunar. Girdiğiniz her ortamı size uygun hale getirmek için maksimum çaba harcar.

Konuşmaların anlaşılması için yönlülük temel bir gereksinimdir. Alfa konuşmaları tanır ve onları takip ederek yakalar.



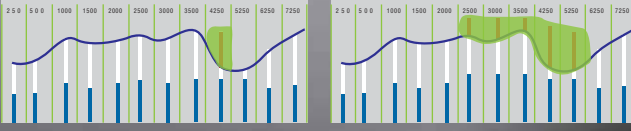

Alfa3, T-FIS *(Tinnitus Frekans İzolasyon Sistemi)*

2008 yılından beri gelişerek devam eden, T-FIS on binlerce insanın Tinnitus sorunu çözerek, huzurlu bir yaşam sundu. T- FIS terapisiyle siz de Tinnitus sorunuzdan kurtulabilir ve mutlu bir hayat sürdürebilirsiniz.

Pediatric

Alfa3 geniş ürün çeşidine ve zengin teknolojik özelliklere sahiptir.


Farklı stilde olan cihaz çeşitleriyle Peditride mükemmel çözümler sunar.



Alfa3, IIC

Estetiđi sevenler iin dıřarıdan gzkmeyen^(*)
ve kanalda kemik blmne yerleřtirilen
IIC cihazı geliřtirdik.

İleri dereceye kadar uygulanabilen ultra kk
CIC cihazıyla konforlu iřitme zgrlğnz elde
edebilirsiniz.

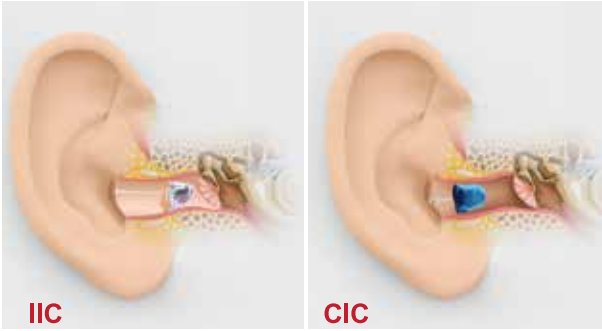

^(*) Kulak kanalı anatomisinin uygun olması lazım.

Alfa3, OPEN

Normalde kulak kanalı açık olup, hava ve ışık alır. Kulak kalıbı yapılıp kapandığında kullanıcıya rahatsızlık veren aşırı basınç hissi oluşur. *Alfa3* temel özelliklerine eklenen open sistem sayesinde tüm kalıp gerektiren kanal içi işitme cihazlarına geniş vent açılabilir^(*). Bu sayede cihazların sürekli ve rahat kullanılmasına olanak tanır.

^(*) Cihaz çeşidine göre Vent genişliği değişkendir.

Her anını yaşayarak ve zevk alarak geçir



Mükemmel ses koleksiyonu

Alfa3 koleksiyonunda farklı tasarımlar ve farklı kategoride işitme cihazları bulunmaktadır. **Alfa3** her işitme kaybına mükemmel çözümler sunar.

	IIC  Ear Sim. 2 ccm	CIC  Ear Sim. 2 ccm	Micro  Ear Sim. 2 ccm	Micro P  Ear Sim. 2 ccm	ITC-D  Ear Sim. 2 ccm	ITE-D  Ear Sim. 2 ccm	ITE-P  Ear Sim. 2 ccm
Max. Çıkış (dB SPL)	120 / 112	120 / 112	118 / 110	124 / 116	124 / 116	131 / 123	131 / 123
Max. Kazanç (dB)	52 / 43	54 / 45	48 / 40	62 / 54	62 / 54	70 / 60	70 / 60
Frekans Alanı	<100-7300 / 7200	<100-7400 / 7100	<100-7700 / 7600	<100-7300 / 6800	<100-7300 / 6800	<100-6400 / 5600	<100-6400 / 5600
Pil Akımı	0,75 / 0,75	0,7 / 0,7	0,83 / 0,83	0,8 / 0,8	0,8 / 0,8	0,84 / 0,86	0,84 / 0,86
Pil Tipi	10	10	10	10	10	312	312
Multi-function button	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Akustik Swich	+	+	+	+	+	+	+
Program Sayısı	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4
Kanal Sayısı	16 / 12	16 / 12	16 / 12	16 / 12	16 / 12	16 / 12	16 / 12
Band Sayısı	16 / 12	16 / 12	16 / 12	16 / 12	16 / 12	16 / 12	16 / 12
MPO-Kanal	16 / 12	16 / 12	16 / 12	16 / 12	16 / 12	16 / 12	16 / 12
Mikrofon	1	1	1	1	2	2	1
Telecoil	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Potans-Ses Kontrolü	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
IP Skoru	–	–	–	–	–	–	–
Ebatlar (LxWxD) mm	–	–	–	–	–	–	–
Titreşim (IEC 60068-2-64)	+	+	+	+	+	+	+
Mekanik Şok (IEC 60068-2-31)	+	+	+	+	+	+	+
Şok Sıcaklık Değişimleri (IEC 60068-2-14)	+	+	+	+	+	+	+
Toz, su ve nem (IEC 60529)	–	–	–	–	–	–	–



Alfa3 ile konforlu işitme özgürlüğü



Bayi:

ear-teknik, broşürdeki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.

Genel Müdürlük:



Yeşilköy Mah. Şehit Özcan Canik Sok. No.2
İç Kapı No.5, 34149 Bakırköy-İST./Türkiye
Tel.+90 212 557 91 68 | helixhearing.com



Karamehmet Mh. Avrupa Serbest Bölge, Adnan Ansoy Bulv. No.11 İç Kapı No.Z02 59930 Ergene-Tekirdağ/Türkiye
helix, bir **ear-teknik** markasıdır.

Avrupa Genel Müdürlük:



Oslebshauser Heerstraße 23
D-28239 Bremen-Germany
kontakt@helixhearing.com